

# kanaVo ご利用マニュアル

2023年12月5日

k a n a t a株式会社

## I 推奨マイクの御利用方法について

kanaVo では、機動性、音声認識精度の側面から、RODE「ワイヤレス ME」の御利用を推奨しています。この特徴は、ユーザの皆さまの声を口元で收音できるマイクと患者様用のマイクの二つにより構成されていることです。これと kaanVo の話者識別機能を組み合わせることにより、高精度の要約が期待できます。  
(御利用形態等により、他のマイクも御紹介させて頂いています。)

RODE「ワイヤレス ME」の利用方法は、下記の通りとなります。

RODE「ワイヤレス ME」は、受信機 (RX) と発信機 (TX) により構成されています。

まずは、下部側面の電源ボタンを3秒ほど長押しして、RX と TX を起動して下さい。



TX の接続性表示 LED が緑色に点滅している際は未接続、緑色に点灯したら接続していることを示します。



- ① 電源ボタン
- ② USB-Cコネクタ
- ③ 3.5mm TRSマイク入力
- ④ 内蔵マイク
- ⑤ バッテリー インジケータLED
- ⑥ 接続性表示LED

RX の側面にある USB ジャックを経由して PC 及びスマホと接続して頂けましたら準備完了です。  
RX は患者様用のマイク、TX は先生用のマイクとして御利用下さい。

同封のピンマイクは、ジャックをマイク端子 (上記写真の③) にさしたうえで、襟元に付けて御利用下さい。

TX は昼休みも含めてこまめに充電して下さい。

診察終了後には、TX と RX の電源ボタンを長押しして電源をオフにして下さい。LED の消灯が電源オフの合図です。

## II kanaVo の御利用方法について

本項では、kanaVo の御利用方法について記します。

### ① 御利用にあたっての動作環境について

以下の OS とブラウザを推奨しています。


- |             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| ・ WindowsOS | バージョン 10 以降       | ブラウザ Chrome, Edge |
| ・ macOS     | バージョン Catalina 以降 | ブラウザ Chrome       |

### ② ソフトウェアの準備

- まず、マイクを接続してからブラウザを起動し、当社より御案内した URL にログインします。
- 画面左側のメニューから「環境設定」を選択して、「【ブラウザ】自分の声のみを記録」を選択します。  
(対面での会話を記録 (AI による話者分離処理を使用) を選択して頂くと、話者分離がされます。この処理には数分の時間を要します。また、正しい話者分離には数か月の学習が必要です。)



- 画面左側のメニューから「マイク設定」を選択して、使用するマイクの候補から「既定-デスクトップマイク (Wireless ME RX)…」 「デスクトップマイク (Wireless ME RX)…」 の何れかを選択します。  
なお、推奨マイク以外を御利用の際は、当該マイクを選択して下さい。

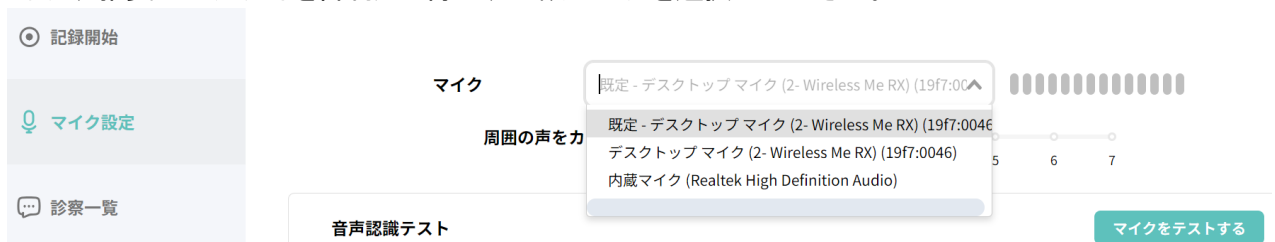

- 上記画面の「マイクをテストする」をクリックして、マイクが機能していることを確認します。周囲の音声を拾ってしまう場合は、「周囲の声をカットする」のレベルを右にアップして下さい。


### ③ 録音

1. 通話記録開始画面でスタートボタンをクリックしたら記録が開始されます。



2. 中断・終了する時は、一時停止ボタンをクリックして下さい。




3.  をクリックして完了です。(次画面で患者 ID 等を適宜入力して下さい。)



### ④ 要約結果の確認

1. Pro 版では、要約の完了までに時間を要します。要約が完了したものから、診察一覧画面のステータス欄に☆が表示されます。

診察一覧画面には、左のメニューから  をクリックすることにより移動できます。

日時	診察時間	タグ	ステータス
2023/12/04 17:40	03:48		☆ もう桂枝湯9月そうですよ。 喘息の腹水は、もう、2月…
2023/12/04 17:26	12:16		☆ 変わりないです、排膿。こ の間の採血した時も別に…
2023/12/04 17:18	03:04		☆ 血圧体重変わりないです血 圧の安定性そうですね…
2023/12/04 16:42	37:29		☆ うん。うん。方がい。背中 も痛い、と。うん。不眠…
2023/12/04 16:38	06:25		☆ 私も、お願いします。足が 腫れてる、脾臓最近っぱ…

2. 上記画面の右端の  をクリックして、詳細画面に遷移して下さい。
3. 詳細画面の上部メモ欄に要約結果が表示されているテキストをコピー&ペーストして下さい。(御利用の PC によって操作性は異なりますが、テキスト上でダブルクリックした上で、ドラッグ&ドロップする方法が一般的です。)

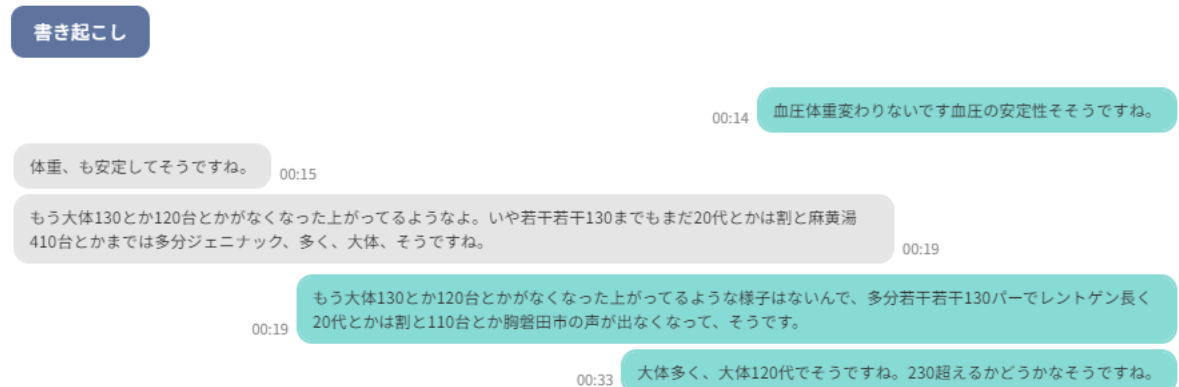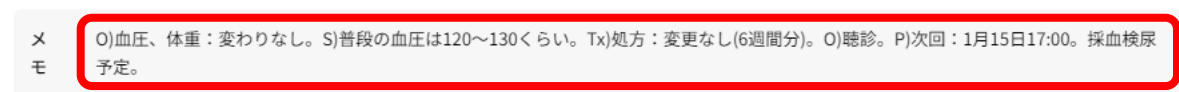

### Ⅲ オンライン診療用アプリの御利用方法について

本項では、オンライン診療用アプリの御利用方法について記します。動作環境は、kanaVo に準じます。

#### ① ご利用開始頂くまでのおおまかな流れ

1. kanaVo の環境設定メニューから「最新版のアプリをダウンロードする」ボタンをクリックしてください。表示されるメニューに従って、ダダウンロードとインストールを進めてください。



がデスクトップに表示されたら、ご案内した「企業 ID」を入力して下さい。



において、kanaVo と同様の「ユーザーID」「パスワード」を入力して下さい。



が表示されたら、右下の歯車アイコンをクリックしてマイクなどの設定をして下さい。



2. 右記画面において、各種設定を行います。「自分の声」は、オンライン診療で御利用のマイクを、「相手の声」も、オンライン診療で御利用のものを選択して下さい。

周囲の声をカットするは「0」を選択して下さい。一般設定については、どれもチェックしない状態を推奨しています。

御利用方法に応じてオンにする場合もございますが、まずは貴院担当者にお問合せ下さい。なお、「対話開始時にウインドウを非表示にする。」は、オンにしないようにご注意ください。設定内容を「保存」して準備完了です。



3. **会話スタート** をクリックしてオンライン診察を開始してください。
4. 中断時は「一時停止」ボタンを、終了する時は「終了」ボタンをクリック。



5. 上述の終了ボタンをクリックすると、右のような画面に遷移します。  
患者コード等を入力してから **保存** をクリックして下さい。  
(この画面が不要の際は、設定画面の「対話終了後の情報入力画面をスキップする」をチェックして下さい。)

The screenshot shows the kanaVO interface with the following fields and buttons:

- 患者コード: 患者を識別するコードがある場合は入力
- タグ: (empty text input)
- テスト: (button)
- ステータス: 選択なし (dropdown menu)
- メモ: メモを入力できます (text area)
- 戻る: (button)
- 保存: (button)

6. 右画面の **終了して待機** をクリックして完了です。  
デスクトップ上に下記画面が表示されたら正常に終了しています。



その後の要約結果の確認方法は、外来と同様です。  
詳細は、前節のⅡ—④をいご覧ください。

